

# Motif Luna® Короткий посібник


## 1. Кнопки та функції

### РК-екран

- A** Режим стимуляції
- B** Режим зціджування
- C** Цикли
- D** Рівень всмоктування
- E** Таймер
- F** Заряд батареї

### Кнопки керування


- G** Кнопка режиму
- H** Кнопка збільш./зменш. циклів
- I** Світлодіодний нічник
- J** Кнопка збільш./зменш. рівнів
- K** Кнопка живлення

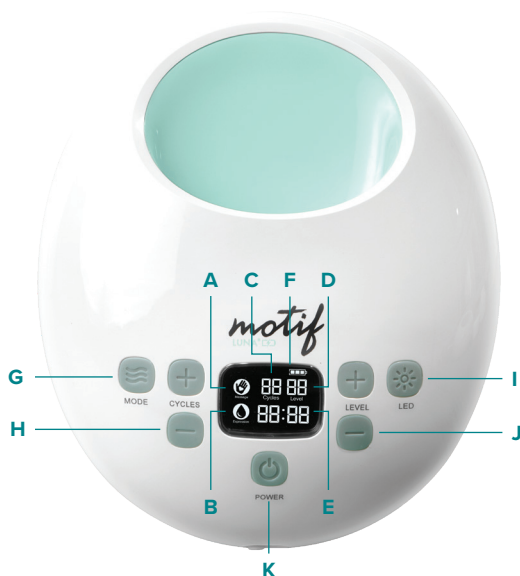

## 2. Підготовка молоковідсмоктувача Luna


### Збірка молоковідсмоктувача Luna

1. Вимийте руки, перш ніж торкатися компонентів молоковідсмоктувача.
2. Вставте діафрагму в нижню частину діафрагми (компонент, який з'єднується з насадкою). Переконайтеся, що вона надійно закріплена і край діафрагми прилягає до нижньої частини діафрагми.
3. Приєднайте верхню частину діафрагми (компонент, який з'єднується з трубкою) до нижньої частини діафрагми та самої діафрагми, зафіксувавши нижню частину діафрагми на обід верхньої діафрагми.
4. Вставте клапан у нижню частину воронки.
5. Приєднайте зібрану діафрагму до верхньої частини воронки. Скручуйте її, щоб прикріпити, а потім зняти, не пошкодивши її.
6. Прикріпіть пляшечку до нижньої частини воронки.
7. Під'єднайте трубку до зібраної діафрагми та під'єднайте інший кінець трубки до насоса. (Для одиночного зціджування закрийте один з отворів для подачі повітря заглушкою.
8. Під'єднайте адаптер живлення до насоса.
9. Вставте адаптер живлення в розетку.

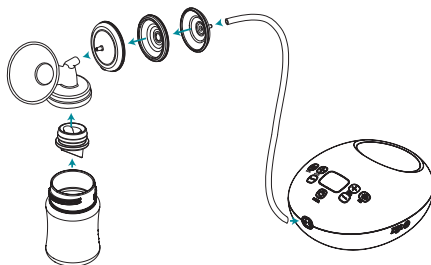


### 3. Використання молоковідсмоктувача Luna

#### ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОДВІЙНИЙ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ

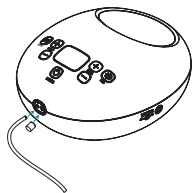

##### Одиночний насос

При поверненні в режим одиночного насоса обов'язково закрийте отвір для подачі повітря заглушкою.

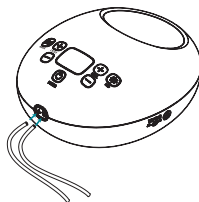

##### Подвійний насос

Щоб використати Luna в режимі подвійного насоса, зніміть заглушку з отвору для подачі повітря та підключіть трубку з додаткового комплекту для бору молока.

#### УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ НАСОСУ LUNA

1. **Натисніть кнопку живлення.** Пристрій увімкнеться, про що свідчить загоряння екрана. Luna перейде у режим стимуляції, щоб прискорити зіджування.
2. **Натисніть кнопку перемикання режиму,** щоб перейти в режим зіджування, як молоко почне текти. Режим стимуляції також має функцію, коли він автоматично завершується і перемикається в режим зіджування без необхідності натискати кнопку зміни режимів вручну.
3. **Відрегулюйте всмоктування до бажаного рівня комфорту.**
4. **Якщо ви хочете припинити зіджування,** спочатку натисніть кнопку живлення, потім зніміть з грудей насадку та комплект для збирання молока.

#### ЗАРЯД БАТАРЕЇВИГОТОВЛЕНО



100% заряджено



75% - 100%



50% - 75%



0% - 25%



0%



Рекомендується заряджати акумулятор, коли рівень заряду досягне 0–25%. Якщо батарея розрядиться, Motif Luna® автоматично вимкнеться.

### 4. Попередження та запобіжні заходи



**УВАГА:** Потенційно небезпечна ситуація, яка може призвести до серйозної травми.



**УВАГА:** Потенційно небезпечна ситуація, яка може спричинити легкі тілесні ушкодження.



БАТАРЕЇВиготовлено для:  
Motif Medical®, LLC  
8 The Green, Suite 5601  
Dover, DE 19901

Тел: (844) 272-8390  
Ел. пошта: [info@motifmedical.com](mailto:info@motifmedical.com)  
Вебсайт: [www.motifmedical.com](http://www.motifmedical.com)

*motif*  
MEDICAL