

Motif Luna® Короткий посібник


1. Кнопки та функції

РК-екран

- A** Режим стимуляції
- B** Режим зціджування
- C** Цикли
- D** Рівень всмоктування
- E** Таймер

Кнопки керування


- F** Кнопка режиму
- G** Кнопка збільш./зменш. циклів
- H** Світлодіодний нічник
- I** Кнопка збільш./зменш. рівнів
- J** Кнопка живлення

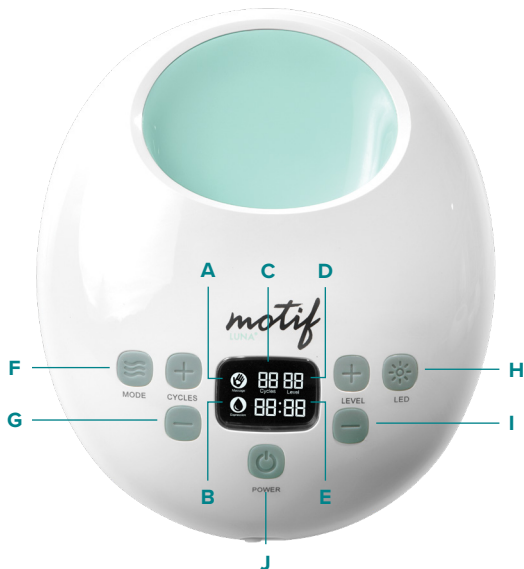

2. Підготовка молоковідсмоктувача Luna


Збірка молоковідсмоктувача Luna

1. Вимийте руки, перш ніж торкатися компонентів молоковідсмоктувача.
2. Вставте діафрагму в нижню частину діафрагми (компонент, який з'єднується з насадкою). Переконайтеся, що вона надійно закріплена і край діафрагми прилягає до нижньої частини діафрагми.
3. Приєднайте верхню частину діафрагми (компонент, який з'єднується з трубкою) до нижньої частини діафрагми та самої діафрагми, зафіксувавши нижню частину діафрагми на обід верхньої діафрагми.
4. Вставте клапан у нижню частину воронки.
5. Приєднайте зібрану діафрагму до верхньої частини воронки. Скручуйте її, щоб прикріпити, а потім зняти, не пошкодивши її.
6. Прикрутіть пляшечку до нижньої частини воронки.
7. Під'єднайте трубку до зібраної діафрагми та під'єднайте інший кінець трубки до насоса. (Для одиночного зціджування закрийте один з отворів для подачі повітря заглушкою).
8. Під'єднайте адаптер живлення до насоса.
9. Вставте адаптер живлення в розетку.

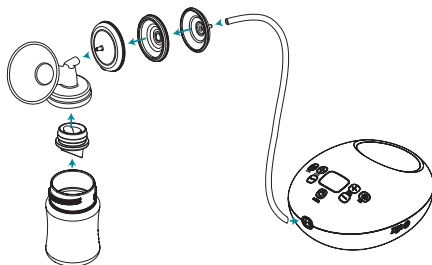


3. Використання молоковідсмоктувача Luna

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОДВІЙНИЙ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ

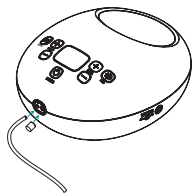

Одиночний насос

При поверненні в режим одиночного насоса обов'язково закрийте отвір для подачі повітря заглишкою.

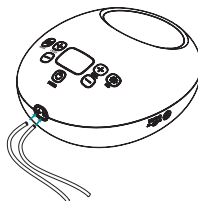

Подвійний насос

Щоб використати Luna в режимі подвійного насоса, зніміть заглишку з отвору для подачі повітря та підключіть трубку з додаткового комплекту для збору молока.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОДВІЙНИЙ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ

10. **Натисніть кнопку живлення.** Пристрій увімкнеться, про що свідчить загоряння екрана. Luna перейде у режим стимуляції, щоб прискорити зіджування.
11. **Натисніть кнопку перемикання режиму,** щоб перейти в режим зіджування, як молоко почне текти. Режим стимуляції також має функцію, коли він автоматично завершується і перемикається в режим зіджування без необхідності натискати кнопку зміни режимів вручну.
12. **Відрегулюйте всмоктування до бажаного рівня комфорту.**
13. **Якщо ви хочете припинити зіджування,** спочатку натисніть кнопку живлення, потім зніміть з грудей насадку та комплект для збирання молока.

4. Попередження та запобіжні заходи



УВАГА: ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРІОЗНОЇ ТРАВМИ.



УВАГА: ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ЛЕГКІ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ.



Виготовлено для:
Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Тел: (844) 272-8390
Ел. пошта: info@motifmedical.com
Вебсайт: www.motifmedical.com

motif
MEDICAL