

Коротка інструкція до Motif Duo®

1. Кнопки та функції

LCD дисплей

- A Пам'ять
- B Таймер
- C Зчіджування
- D Живлення
- E Рівень заряду акумулятора
- F Масаж
- G Вакуум

Кнопки управління


- H Кнопка живлення
- I Кнопка «Більше»
- J Кнопка «Менше»
- K Кнопка «Режим»



2. Підготовка молоковідсмоктувача Duo


Збірка молоковідсмоктувача Duo

1. Перед збіркою помийте руки.
2. Вставте проміжне кільце в нижню частину діафрагми сітчастою поверхнею донизу. Закрутіть діафрагму кришкою (верхньою частиною).
3. Прикріпіть шнурок до молоковідсмоктувача за допомогою кільця в нижній частині основного корпусу. Протягніть шнурок через кільце, доки він не буде затягнутий.
4. Вставте насадку для грудей в з'єднувач (з'єднувальний елемент).
5. Приєднати клапан, помістивши його в нижню частину конектора. Прикрутіть пляшечку до конектора.
6. Прикрутіть зібрану діафрагму до верхньої частини конектора.
7. Приєднати один кінець трубки до корпусу молоковідсмоктувача.
8. Приєднати інший кінець трубки до задньої частини діафрагми. Для цього вставте кінчик кришки діафрагми в трубку.
9. Для очищення та подальшого зберігання приладу, відкрутіть пляшечку. Зніміть трубку з обох сторін. Відкрутіть елементи діафрагми від конектора. Зніміть насадку для грудей з конектора. Після кожного використання дотримуйтесь інструкцій з очищення молоковідсмоктувача.

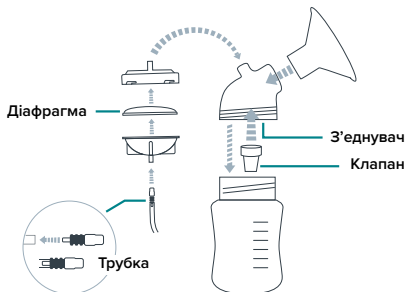


3. Використання Duo

Як користуватися подвійним насосом

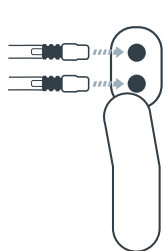

Режим подвійного зціджування

Щоб перейти в Режим подвійного зціджування, зніміть заглушку із отвору повітряного витоку та приєднайте трубку з додаткового комплекту.

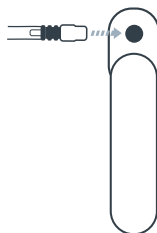

Режим одиничного зціджування

Під час повернення до Режиму одиничного зціджування обов'язково закрийте отвір повітряного витоку заглушкою.

Увімкнення/вимкнення Duo Pump

1. **Натисніть кнопку живлення.** Пристрій ввімкнеться, LCD-дисплей загориться. Duo запустить Режим масажу для покращення лактації.
2. **Натисніть кнопку Режим.** Після притоку молока молоковідсмоктувач перейде в Режим зціджування.
3. **Відрегулюйте всмоктування до бажаного рівня комфорту.**
4. **По можливості використовуйте молоковідсмоктувач лише тоді, коли він повністю заряджений.** Перед першим використанням підключіть молоковідсмоктувач до адаптера живлення та повністю його зарядіть. Рівень заряду акумулятора, який відображається на LCD-дисплеї, може відрізнитися від фактичної ємності акумулятора. Щойно на екрані відобразиться [Lo Bt] одразу ставте прилад на зарядку. Якщо молоковідсмоктувач не використовувався протягом тривалого періоду часу, перед черговим використанням обов'язково перевірте рівень заряду акумулятора. Від'єднайте адаптер живлення від молоковідсмоктувача відразу після заряджання приладу.

Режим пам'яті

1. **Затисніть кнопку живлення на 2 секунди,** щоб активувати функцію Пам'яті. Значок «Пам'ять» почне миготіти і почнеться запис поточного всмоктування.
2. **Під час всмоктування налаштуйте параметри приладу відповідно до ваших уподобань.**
3. **Затисніть кнопку живлення ще на 2 секунди,** щоб зупинити запис. Значок «Пам'ять» на дисплеї сповістить про збереження програми.
4. Щоб відтворити програму всмоктування, **затисніть кнопку «Менше»** (кнопка для зменшення інтенсивності вакууму) на 2 секунди.

4. Попередження та запобіжні заходи



Попередження! Потенційно небезпечна ситуація, яка може призвести до серйозної травми.



Увага! Потенційно небезпечна ситуація, яка може призвести до легких тілесних ушкоджень.



Виготовлено для:
Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

biliblanketbaby.com/UA
Телефон: (844) 272-8390
Електронна адреса: info@motifmedical.com
Веб-сторінка: www.motifmedical.com

motif
MEDICAL